



C-ojo
KIT DE PROCEDIMIENTO

Ribo-Ker incluye un vial desechable de 1,5 ml de riboflavina hipoosmolar al 0,14 %, apto para tratamientos con y sin epitelio, incluida la iontoforesis. Incluye espéculo desechable y tapa protectora para la seguridad de la paciente.

Via degli Stagnacci 12/E
50018 - Scandicci - FI - Italia
teléfono +39 055 72219 | fax +39 055 7215557
Correo electrónico: cso@csoitalia.it | Web: www.csoitalia.it

CE 0051

DATOS TÉCNICOS	VALOR
Alimentación principal	Baterías recargables con cable de alimentación y fuente de alimentación de 5 V cuando se montan en accesorios.
Diámetro de apertura	De 5 a 12 mm
fuente de luz	UV-A 365 nm
Dimensiones (Altura x Largo x Profundidad)	182 x 55 x 62 mm
Peso del dispositivo	450 g
Peso accesorio C-SL1 (adaptador para lámpara de hendidura)	110 g
Peso accesorio C-SL2 (adaptador para lámpara de hendidura)	170 g
Peso y soporte para accesorios C-ST (opcional)	1900 g
Peso de la fuente de alimentación de red	550 g
Peso del cable de alimentación USB	140 g
Distancia de trabajo entre dispositivos y paciente	36 mm +/- 5 mm

ACCESORIOS


Caso C




Base C


Enfoque C


C-SL1
Adaptador para lámpara de hendidura


C-SL2
Adaptador para lámpara de hendidura


Montura en C (opcional)

Las especificaciones y las imágenes no son vinculantes contractualmente y pueden modificarse sin previo aviso. Windows® es una marca comercial de Microsoft Corporation.

CO134 | Rev. 02 del 02/02/2022





SOPORTE PARA LÁMPARA DE RANURA
Para lámparas CXL modernas: se adapta a la mayoría de las lámparas de hendidura de estilo torre o compacto.

MONTAJE DE MESA
Para el modelo CXL clásico: accesorio de montaje en mesa disponible.

PROTOCOLOS INTEGRADOS
Elija entre varios protocolos clínicos preestablecidos.

GAMA DE INTENSIDADES
Ofrece 3, 9, 15, 18 y 30 mW/cm².

LUZ PULSADA Y CONTINUA
Para diversos entornos de queratocono y queratitis infecciosa

PERFIL DE ESPESOR AJUSTABLE
El perfil del haz proporciona más energía en la periferia de la córnea.

TECNOLOGÍA DE BATERÍAS SUPERIOR
Diseñado para durar miles de tratamientos.

EN





CRUZAMIENTO EN LA LÁMPARA DE HENDURA



PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO C-eye

El dispositivo dispone de numerosos protocolos para el tratamiento de reticulación epi-on y epi-off, con irradiación UV continua y pulsada.

C-eye proporciona un perfil de irradiación UV diferenciado, con el fin de compensar el aumento periférico del grosor corneal.

PROTOCOLO SUB400

El protocolo sub400 para córneas delgadas y ultradelgadas está integrado en el dispositivo C-eye. Este protocolo proporciona una fluencia individualizada a la córnea, suministrando la cantidad adecuada de energía que la estabilizará, evitando una exposición excesiva a los rayos UV.
exposición.


PROTOCOLO DE REFRACCIÓN

Existe un protocolo específico disponible para el tratamiento. de pacientes que se sometieron a LASIK, PRK o SMILE.
Su objetivo es mejorar la resistencia biomecánica en pacientes de alto riesgo.







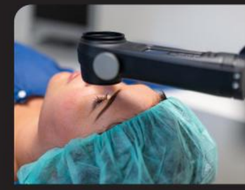



El dispositivo C-eye combina
Una serie de características interesantes
con la posibilidad única de utilizar la tecnología CXL
y PACK-CXL en la lámpara de hendidura.

Cuando no está en uso, el dispositivo C-eye
Se coloca de forma segura en su base para
la carga mediante USB-C.
La base también funciona como medidor de rayos
UV, lo que garantiza que la salida del LED UV esté
calibrada y sea correcta antes del tratamiento.

TRATAMIENTO EN LA LÁMPARA DE HENDIDURA

El dispositivo C-eye se puede utilizar de la forma "moderna" en la lámpara de hendidura con los adaptadores suministrados, o de la forma "clásica" en posición tumbada, montándolo en la montura C (opcional).

TRATAMIENTO CXL Y PACK-CXL

El C-eye es el dispositivo más innovador para realizar procedimientos de reticulación corneal para ectasia (queratocono, queratoglobo, PMD, ectasia postoperatoria), queratitis (PACK-CXL) y procedimientos refractivos (en combinación con PRK, LASIK y SMILE).



CRUZAMIENTO EN POSICIÓN DE COLOCACIÓN

